

# neno<sup>®</sup> beauty

LUVE

WIELOZADANIOWE URZĄDZENIE  
DO PIELĘGNACJI TWARZY  
Z MIKROPRĄDAMI I TECHNOLOGIĄ  
ODMŁADZANIA SKÓRY

*Exclusive Series*



*Exclusive Series*

# *Poznaj Neno Beauty Luve*

Przełom w kształtowaniu owalu twarzy – bez igieł i dyskomfortu. Mikroprądy poprawiają napięcie twarzy, napinają skórę, pomagają optycznie wygładzić linie mimiczne oraz widoczne zmarszczki, nadając twarzy młodszy wygląd. Elektroporacja, zwiększa przepuszczalność skóry, wzmacniając efekt wnikania kremów. EMS poprawia kontur twarzy, ogranicza opadanie skóry. Cztery rodzaje światła LED: pomagają ograniczyć widoczne niedoskonałości, przebarwienia oraz poprawiają rozświetlenie i jędrność skóry. Zmarszczki nie definiują wieku. Ale z Neno Beauty Luve możesz wpłynąć na to, jak wygląda Twoja skóra.



*Exclusive Series*

# *Rekomendacje dla Neno Beauty Luve*



- Widoczne linie i zmarszczki mimiczne.
- Utrata definicji linii żuchwy.
- Skóra bez jędrności, wymagająca rozświetlenia i naturalnego promiennego GLOW.
- Widoczne oznaki upływu czasu.
- Skóra wymagająca ujędrnienia.
- Utrata witalnego wyglądu cery.

*Exclusive Series*

# ***Dlaczego efekty używania Neno Beauty Luve są tak spektakularne?***

Neno Beauty Luve łączy w sobie nowoczesne technologie: mikroprądy, mikroimpulsy, elektroporację, EMS oraz 4 długości fal światła LED – co oznacza kompleksowe działanie przeciwstarzeniowe, regeneracyjne, liftingowe z efektem głębokiego odświeżenia i uwolnienia skóry od oznak zmęczenia. Korzystanie z urządzenia, to jak seria profesjonalnych zabiegów w domu – bez wizyty w salonie, bez bólu i bez długiego czasu rekonwalescencji, a z efektami, które widzisz i czujesz.

## ***Po 7 dniach** – moja skóra jest inna.*

- bardziej promienna i wypoczęta cera,
- wyrównany koloryt skóry – zdrowy blask bez filtrów,
- uczucie głębokiego odświeżenia i natychmiastowego komfortu,
- lepsza absorpcja kosmetyków – kremy i serum zaczynają działać szybciej.

## ***Po 14 dniach** – wow, co się stało z moimi zmarszczkami?*

- mniej widoczne linie i zmarszczki,
- bardziej sprężysta i napięta twarz,
- wyrównany koloryt i redukcja zaczerwienień,
- cera robi się gładka, wygląda na bardziej odżywioną i zadbaną, nawet bez makijażu.

## ***Po 30 dniach** – czy to naprawdę moja skóra?*

- redukcja oznak starzenia,
- skóra jest bardziej jędrna, gładka i elastyczna,
- naturalny, zdrowy glow.






Tryb AIR SHOT



Czujnik kontaktu  
ze skórą

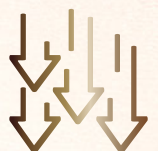

Tryb BOOSTER



5 poziomów  
intensywności



Tryb MC



4 tryby



Tryb DERMA SHOT



Timer



Exclusive Series

# Profesjonalna pielęgnacja w Twoim domu

## AIR SHOT - architekt struktury (Blue LED)

Poczuj moc odświeżenia. Mikroimpulsy i wibracje o wysokiej częstotliwości natychmiast poprawiają strukturę skóry i zwężają pory. Ten idealny „podkład” pod dalszą pielęgnację sprawia, że Twoja cera staje się chłonna niczym gąbka, gotowa przyjąć każdą kroplę luksusowego serum.

## BOOSTER - zastrzyk nawilżenia (Yellow LED)

Wykorzystaj potęgę elektroporacji, by „wtłoczyć” składniki aktywne w najgłębsze warstwy naskórka. Żółte światło i wibracje pobudzają mikrokrążenie, dając efekt Glass Skin - cery tak nawilżonej i promiennej, że nie będziesz chciała nakładać makijażu.

## MC - generator młodości (Green LED)

Zatrzymaj czas dzięki mikroprądom, które stymulują produkcję kolagenu u samego źródła. Zielone światło koi i wyrównuje koloryt, podczas gdy technologia MC „prasuje” linie i zmarszczki. To Twój codzienny rytuał zagęszczania skóry i przywracania jej młodzieńczej witalności.

## DERMA SHOT - ekspresowy lifting (Red LED)

Twoja osobista siłownia dla mięśni twarzy. Dzięki zaawansowanej technologii EMS i czerwonemu światłu LED, ten tryb intensywnie ujędrnia, modeluje linię żuchwy i unosi ował. Efekt? Twarz wyraźnie wymodelowana, napięta i pełna energii - jak po profesjonalnym liftingu manualnym.



Exclusive Series

Neno Beauty Luve to zaawansowane urządzenie do pielęgnacji twarzy, które łączy 4 tryby pracy i 5 poziomów intensywności, dając Ci pełną kontrolę nad każdym zabiegiem. Poznaj możliwości jakie daje Ci Neno Beauty Luve:

# *Mikroimpulsy elektryczne - dla odżywienia*

Neno Beauty Luve wykorzystuje technologię mikroimpulsów elektrycznych, które oddziałują na skórę na poziomie komórkowym. Delikatne impulsy pobudzają mikrokrążenie, poprawiają dotlenienie tkanek i wspierają procesy regeneracyjne. Dzięki temu skóra staje się lepiej odżywiona, odzyskuje blask i zdrowy wygląd.



*Exclusive Series*




## ***Elektroporacja***

*Twoje kosmetyki zasługują na to, by działać głębiej. Elektroporacja to rewolucyjna technologia, która „otwiera drzwi” do komórek Twojej skóry. Aktywne składniki Twoich ulubionych kremów i serów nie zatrzymują się na powierzchni, ale są dosłownie wpompowywane w głąb skóry. To profesjonalna mezoterapia bez igieł w zaciszu Twojej łazienki – efekt? Skóra nasycona składnikami odżywczymi, ekstremalnie nawilżona i zregenerowana od środka.*

*Exclusive Series*

# *Mikroprądy - biologiczny budzik dla Twojej cery*

Poczuj, jak Twoja skóra budzi się do życia. Mikroprądy to subtelna, ale potężna dawka energii, która pobudza mikrokrążenie i natychmiast dotlenia tkanki. To tryb, który „prasuje” zmarszczki od wewnątrz, stymulując produkcję kolagenu. Cera odzyskuje swój zdrowy, promienny blask, jak po luksusowym zabiegu w SPA, a Ty wyglądasz na wypoczętą i pełną witalności.

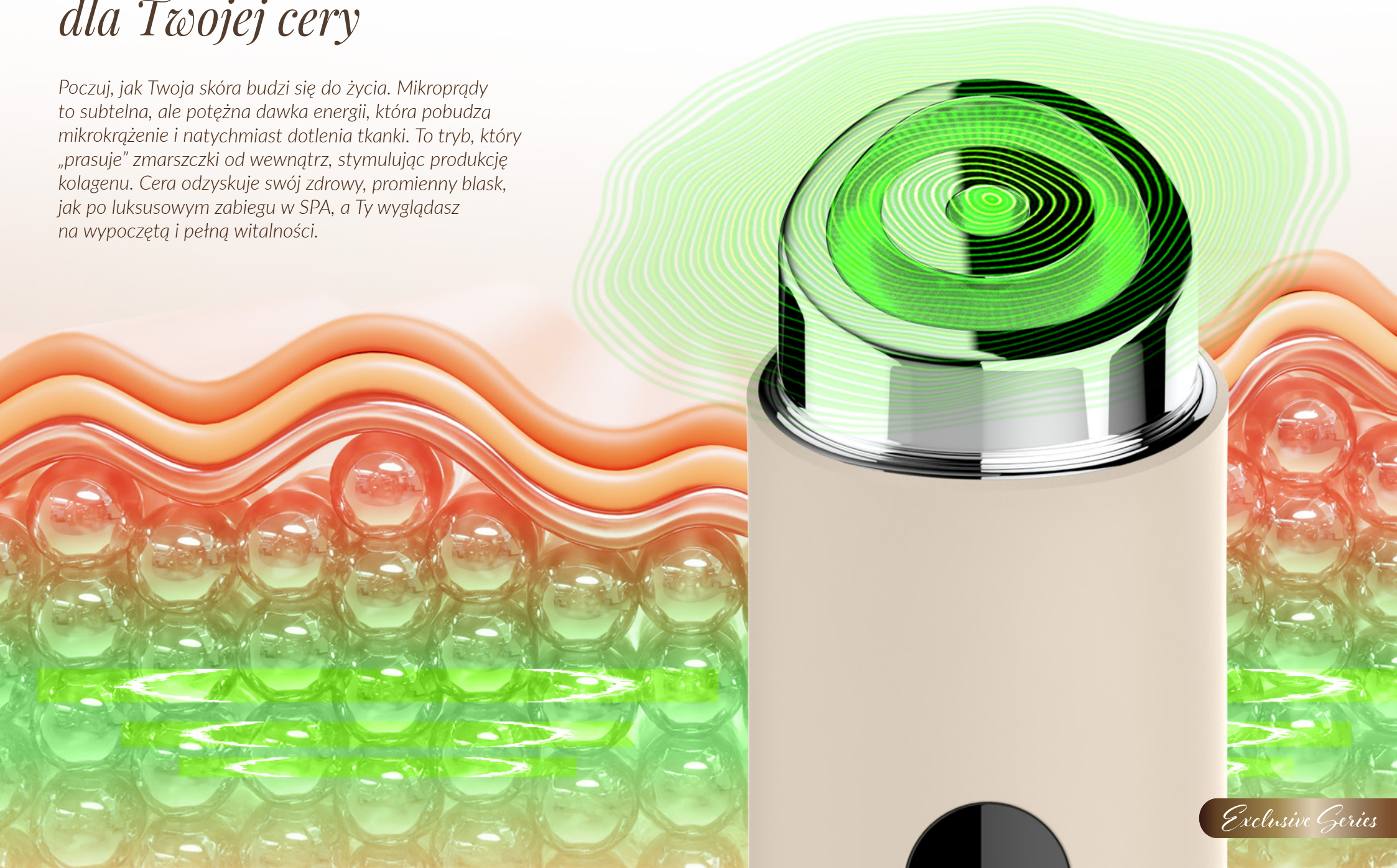


*Exclusive Series*

# *Technologia EMS*

Najmocniejsze uderzenie w walce z grawitacją. EMS to inteligentny trening, który robi dla Twojej twarzy to, co siłownia dla sylwetki.

Zamiast maskować problemy, uderzamy w ich źródło – mięśnie. Dzięki intensywnej stymulacji,

Twoja linia żuchwy odzyskuje ostrość, a policzki unoszą się, przywracając twarzy idealny, młodzieńczy kontur. To Twój osobisty rzeźbiarz, który każdego dnia dba o to, by skóra była napięta, sprężysta i niesamowicie jędrna.

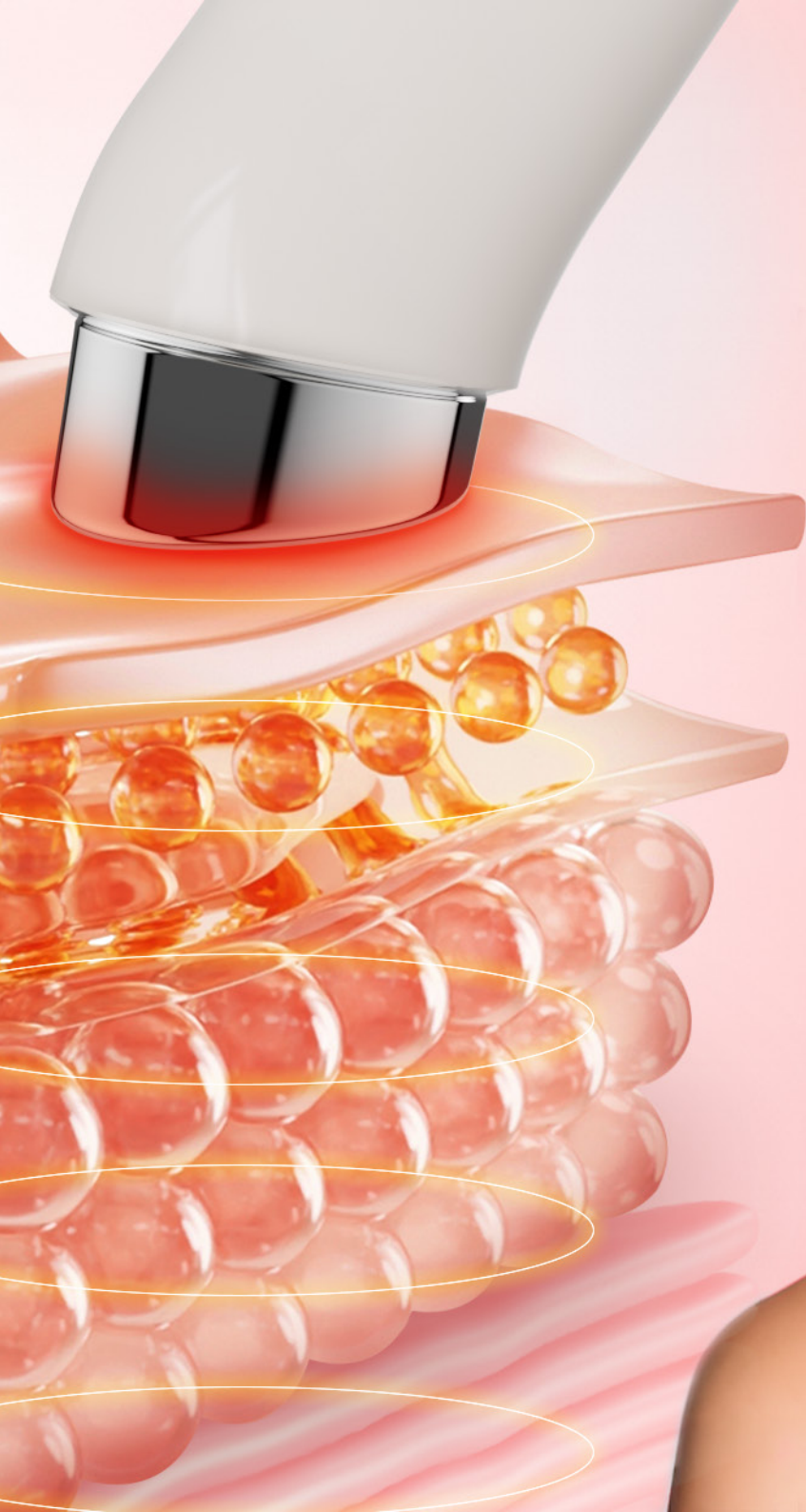

*Exclusive Series*

# Cztery długości fal światła

**460 nm**

ŚWIATŁO NIEBIESKIE

**Światło niebieskie o długości fali 460 nm** pobudza naturalne procesy naprawcze skóry, wspierając jej regenerację. Ma właściwości antybakteryjne, dzięki czemu zmniejsza stany zapalne, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia, a dodatkowo pomaga w regulacji produkcji sebum.

**521 nm**

ŚWIATŁO ZIELONE

**Światło zielone o długości fali 521 nm** wspiera redukcję widoczności zaczerwienień, działa kojąco na cerę i poprawia jej ogólną kondycję.

**590 nm**

ŚWIATŁO ŻÓŁTE

**Światło żółte o długości fali 590 nm** działa kojąco, pomaga wyrównać koloryt i nadaje skórze świeży, promienny wygląd.

**630 nm**

ŚWIATŁO CZERWONE

**Światło czerwone o długości fali 630 nm** pobudza mikrokrążenie, wspiera wyrównanie kolorytu skóry i redukcję przebarwień, a także działa kojąco oraz wyciszająco na cerę.

# *Wibracje soniczne*

Specjalnie opracowane wzorce wibracji Neno Beauty Luve, poprawiają jędrność i elastyczność skóry.



*Exclusive Series*

# *Intuicyjna pielęgnacja - Ty odpoczywasz, Neno Beauty Luve pracuje*

Pielęgnacja z Neno Beauty Luve jest prostsza, niż myślisz. Nasze tryby zostały zaprojektowane tak, by intuicyjnie prowadzić Cię do celu:

1. Przygotuj bazę (**Tryb Air Shot**): Zaczynij od suchej skóry. Krótkie impulsy otworzą mikrokanały, przygotowując cerę na przyjęcie tego, co najlepsze.

2. „Nakarm” skórę (**Tryb Booster**): Nałóż ulubione serum z kwasem hialuronowym lub witaminą C. Urządzenie „wpompuje” składniki aktywne tam, gdzie dzieje się magia.

3. Rzeźbij i Unieś (**Tryby MC & Derma Shot**): Nałóż żel przewodzący i wykonuj płynne ruchy ku górze. Poczuj, jak Twoje mięśnie się napinają, a owal twarzy odzyskuje młodzieńczy kontur.

Nie musisz szukać specjalistycznych preparatów medycznych. Szukaj produktów oznaczonych jako:

1. Żel do zabiegów z urządzeniami RF i EMS (najbezpieczniejsza opcja).
2. Lekkie, beztłuszczowe serum żelowe (np. z kwasem hialuronowym lub aloesem).
3. Unikaj produktów na bazie olejów i tłustych kremów podczas zabiegu – tłuszcz to izolator, który zablokuje działanie prądu i fal radiowych.



*Exclusive Series*

# ***Twój beauty code - zasady bezpieczeństwa i higieny***

**Zachowaj higienę** – po każdym użyciu oczyść urządzenie, przecierając je suchą lub delikatnie zwilżoną ciepłą wodą z odrobiną łagodnego mydła ściereczką. W celu dezynfekcji przetrzyj głowicę chusteczką nasączoną płynem na bazie alkoholu izopropylowego (do 70% stężenia). Unikaj agresywnych detergentów, wybielaczy i zanurzania urządzenia w wodzie.

**Bezwzględnie unikaj stosowania na implantach** – unikaj stosowania urządzenia, jeśli posiadasz jakiegokolwiek implanty elektroniczne (np. rozrusznik serca, pompa insulinowa) lub metalowe implanty w obrębie głowy i szyi (w tym implanty stomatologiczne, mosty, korony, aparaty ortodontyczne, metalowe implanty słuchowe).

**Omijaj wrażliwe obszary** – Unikaj stosowania urządzenia bezpośrednio pod oczami, na powiekach oraz na szyi w rejonie tarczycy. W okolicy oczu, nosa oraz ust używaj zawsze najniższego poziomu intensywności.

**Regularność** – najlepsze efekty uzyskasz przy systematycznym stosowaniu:  
**Tryb Airshot:** 2-3 razy w tygodniu (sesja maksymalnie 5 minut); **Tryb Booster:** 1-3 razy dziennie (sesja 5-10 minut); **Tryb MC:** 1-3 razy dziennie (sesja 5-10 minut); **Tryb Derma Shot:** 1-3 razy dziennie (sesja 5-10 minut).

**Używanie urządzenia jest bezwzględnie przeciwwskazane w okresie ciąży i laktacji.**

**Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi.**



*Exclusive Series*

# *Twój osobisty strażnik piękna*

Neno Beauty Luvé myśli za Ciebie! Światło LED i timer uruchamiają się tylko w kontakcie ze skórą. Co to oznacza? Zero ryzyka przypadkowego świecenia w oczy. Precyzyjne 5 minut czystej pielęgnacji (timer liczy tylko realną pracę!). Bezpiecznie, inteligentnie i zawsze pod kontrolą dla efektu „wow”!

*5 min* ↻

*Exclusive Series*

# Akcesoria w zestawie

Neno Beauty Luve wyposażono w praktyczną pokrywkę, która chroni głowicę masującą przed kurzem i zabrudzeniami, a także w elegancki woreczek do przechowywania. Pokrywka dba o to, aby urządzenie zawsze pozostawało czyste i gotowe do użycia, a miękki woreczek idealnie sprawdza się zarówno w domu, jak i w podróży. W ten sposób Neno Beauty Luve zachowuje estetyczny wygląd i jest zawsze pod ręką.



*Exclusive Series*

# *Chcesz zwiększyć efekt pielęgnacji?*

Rozpocznij pielęgnację od dokładnego  
oczyszczenia skóry szczoteczką **Neno Beauty Mica**.  
Przygotowana w ten sposób cera lepiej reaguje  
na działanie mikroprądów Neno Beauty Luve,  
potęgując efekt wygładzenia i odmłodzenia.



**neno**<sup>®</sup>  
*beauty*  
MICA

*Exclusive Series*

# nenob<sup>®</sup> beauty

## LUVE

### DANE TECHNICZNE

Model:	Neno Beauty Luve
Zasilanie:	5V 0.7A
Moc:	5W
Bateria:	2200 mAh
Timer:	5 min
Materiał:	ABS+PP+304 stal nierdzewna
Wymiary:	38.2×182.7×38.6 mm
Waga:	304g
Kod EAN:	5902479677170
Wymiary pudełka:	148×245×60 mm
Waga pudełka:	0,64 kg
PN:	NEN-DOM-PI003
Zawartość zestawu:	masażer, woreczek do przechowywania, ściereczka z mikrofibry, kabel typu-C, instrukcja obsługi
Kontakt:	Tel.: 731 594 301; mail: info@nenob.pl
Producent:	KGK Trend sp. z o.o. ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków



NAGRODY DLA  
FIRMY KGK TREND

Właściciela marki Neno:



Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy, wsparcia albo masz pytania do ekspertów, zadzwoń lub napisz bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta Neno. Infolinia: 731 594 301, mail: info@nenob.pl

Urządzenie przeznaczone do pielęgnacji skóry w warunkach domowych. Nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje zabiegów dermatologicznych ani medycznych.