

neno[®] beauty

NAYA

MASAŻER DO TWARZY
Z TECHNOLOGIA
EMS I FUNKCJĄ TERMOTERAPII

Exclusive Series



EMS technology

Exclusive Series

Poznaj Neno Beauty Naya

Profesjonalna i efektywna zmiana. Przełom w codziennej pielęgnacji – bez igieł, bólu i wizyt w gabinecie. Technologia EMS zwiększa mikrokrążenie i dba o dobrą kondycję tkanek, zapewniając efekt liftingu kosmetycznego. Mikroimpulsy pomagają wygładzać linie mimiczne, zmarszczki i ograniczają opadanie owalu twarzy. Termoterapia nadaje skórze jędrność i natychmiastowy efekt odświeżenia. Stymulacja potęguje napięcie policzków, podbródka i linii żuchwy, a skóra staje się sprężysta. Wibracje masażera łagodzą opuchliznę i nadają twarzy efekt wypoczęcia. Zmarszczki nie muszą definiować wieku.



Rekomendacje dla Neno Beauty Naya



- Widoczne linie i zmarszczki mimiczne, poziome linie na czole.
- Wiotka skóra w okolicach podbródka.
- Skóra bez jędrności, pojawia się wiotkość, spada napięcie.
- Skóra wymagająca rozświetlenia i naturalnego GLOW.

Efekty używania Neno Beauty Naya

Po 7 dniach – moja twarz wygląda na wypoczętą!

- wyraźnie gładsza i bardziej promienna skóra,
 - modelowanie konturów, które przywraca twarzy energię i świeżość,
 - efekt porannego odświeżenia bez makijażu,
 - termoterapia poprawia mikrokrążenie
- Już po tygodniu twarz wygląda bardziej świeżo i zdrowo.

Po 14 dniach – czy zrobiłam coś z owalem twarzy?

- poprawiona jędrność i elastyczność skóry, znika opuchnięcie i obrzęk,
 - mniej widoczne oznaki zmęczenia,
 - subtelnie zarysowany owal twarzy,
 - skóra lepiej reaguje na kosmetyki pielęgnacyjne
- Efekt optycznego wypełnienia i wygładzenia struktury skóry.

Po 30 dniach – to już prawdziwa zmiana!

- ujędrniona i napięta skóra,
 - bardziej ostre kontury twarzy,
 - redukcja zmarszczek,
 - naturalny glow bez filtrów
- To moment, w którym widzisz realne modelowanie twarzy i efekt świadomej pielęgnacji premium.

EMS

Elektryczna Stymulacja Mięśni: stymuluje mięśnie twarzy, poprawiając ich napięcie i sprężystość skóry

Podwójna głowica masująca

Zaprojektowana z myślą o precyzyjnej stymulacji mięśni twarzy

Termoterapia

Delikatnie podgrzewa skórę do temperatury 42°C, wspomagając mikrokrążenie i zwiększając jej elastyczność

Masaż wibracyjny

Redukuje obrzęki i przynosi uczucie relaksu

Timer

Automatyczny 6-minutowy timer oraz powiadomienie o zmianie obszaru masażu co 15 sekund



Pamięć

Funkcja pamięci

Łatwy w obsłudze

Jeden przycisk funkcyjny

5 poziomów

5 poziomów intensywności

Bezprzewodowy

Urządzenie bezprzewodowe, kompaktowy design

Podstawka

Zapewnia stabilne i higieniczne przechowywanie masażera



Termoterapia



Masaż wibracyjny



EMS



Podwójna głowica



Funkcja pamięci



5 poziomów




Bezprzewodowy



Timer



Exclusive Series

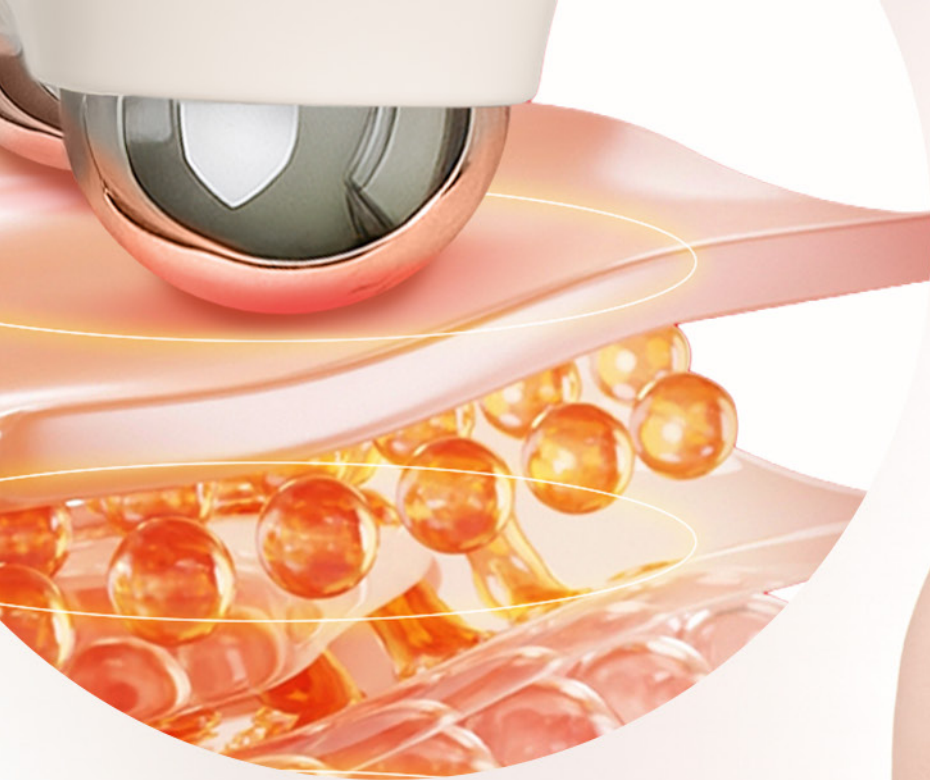

Technologia EMS

Technologia EMS w Neno Beauty Naya to inteligentny trening dla mięśni twarzy, których nie wyćwiczysz tradycyjnym masażem. Delikatne, ale precyzyjne mikroprądy docierają głęboko do struktur podskórnych, zmuszając je do natychmiastowej regeneracji i pracy.

- **Efekt „V-Shape”:** poczuj, jak Twoja linia żuchwy odzyskuje dawny kontur, a policzki subtelnie się unoszą. To Twoja tajna broń w walce o wyraźnie zarysowane rysy i wymodelowany kontur.

- **Siłownia dla młodości:** EMS sprawia, że skóra staje się zwarta, gęsta i nieprawdopodobnie sprężysta, a zmarszczki mimiczne zostają wygładzone od wewnątrz.

- **Poczuj się jak na zabiegu premium:** delikatne mrowienie, które poczujesz podczas zabiegu, to znak, że Twoje komórki właśnie otrzymały potężną dawkę energii. To bezinwazyjna redefinicja piękna – bez igieł, bez bólu i bez kompromisów.

Exclusive Series



Termoterapia – luksusowe ukojenie i moc regeneracji

Głęboka infuzja składników: delikatne, kojące ciepło natychmiast otwiera pory, działając jak magnes na Twoje ulubione serum lub krem. Składniki aktywne nie zostają na powierzchni – wnikają głęboko, tam gdzie rodzi się blask i nawilżenie.


Ciepło, które pobudza mikrokrążenie: błyskawicznie dotleniając każdą komórkę. Efekt? Cera staje się soczysta, odżywiona i promienna, a oznaki zmęczenia znikają w kilka minut.

Rytuał odprężenia: poczuj, jak napięcie całego dnia odpływa z Twojej twarzy. Rozluźnione mięśnie to mniej utrwalonych linii mimicznych i twarz, która wygląda na wypoczętą.

Exclusive Series

Skin-care Guru

Pożegnaj napięcia i powitaj promiennosc!
Precyzyjne mikrowibracje masują Twoją skórę
na głębszym poziomie, zapewniając jej
natychmiastowe rozluźnienie i lepsze dotlenienie.
Kilka minut z Neno Beauty Naya wystarczy,
by cera odzyskała jedwabistą gładkość
i wypoczęty wygląd.

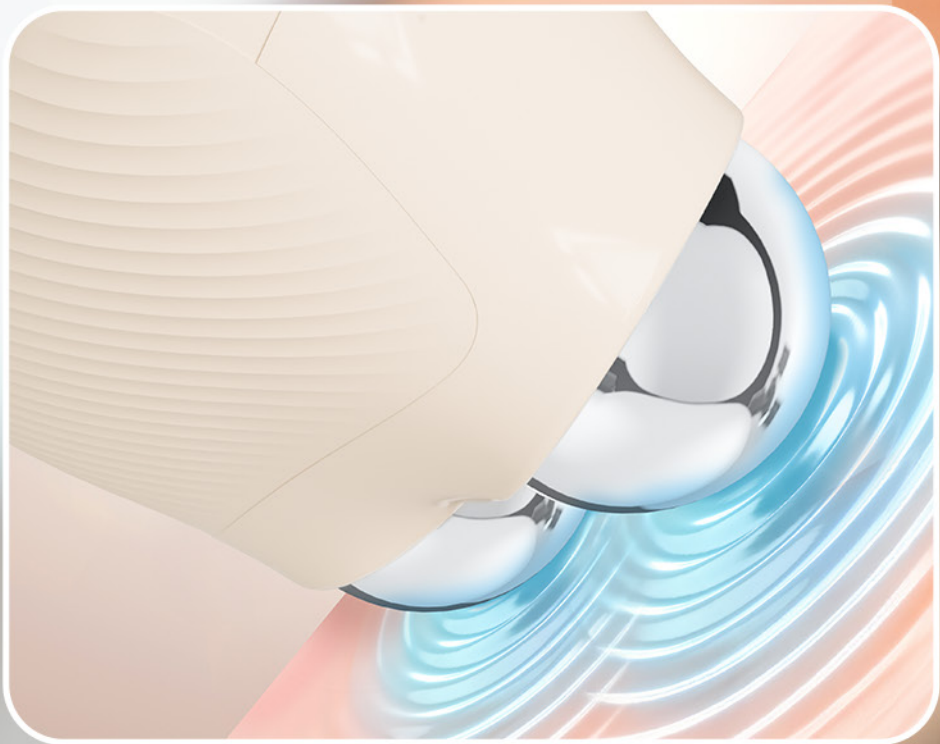

Exclusive Series

Skin-care Expert

Podwójna głowica
masująca Neno Beauty
Naya to klucz do
precyzyjnej stymulacji
i poprawy napięcia skóry.
Idealnie odwzorowuje linie
Twojej twarzy, sprawiając,
że masaż jest niezwykle
komfortowy i trafia
dokładnie tam, gdzie
pojawiają się oznaki
utruty jędrności. Rezultat?
Wyraźniej zarysowany
kontur i skóra pełna
witalności.



Exclusive Series

A close-up photograph of a woman's face. She is holding a white, handheld facial device with two silver electrodes against her cheek. The device has a textured, ribbed surface. The woman has a neutral, pleasant expression and is looking slightly to the side. The background is a soft, light blue.

Moc pod Twoją kontrolą - 5 stopni personalizacji

Twoja skóra jest unikalna, dlatego Neno Beauty Naya dopasowuje się do Ciebie, a nie na odwrót.

Aż pięć poziomów intensywności pozwala Ci stworzyć indywidualny program pielęgnacji, od kojącego masażu po intensywny trening ujędrniający.

Zacznij łagodnie: pozwól swojej skórze rozsmakować się w technologii EMS na niższych poziomach - to idealny wstęp do głębokiej regeneracji.

Osiągaj więcej: w miarę postępów odkrywaj pełną moc urządzenia. Z każdym stopniem wyżej Twoje mięśnie pracują intensywniej, a efekty modelowania stają się jeszcze wyraźniejsze.

Komfort bez kompromisów: Ty decydujesz, jakiej siły potrzebujesz dzisiaj. To bezpieczeństwo połączone z profesjonalną skutecznością, dokładnie tak, jak lubisz.

Sekret Twojego uniesienia: rytuał modelowania

Wydobądź maksimum możliwości z Neno Beauty Naya. Prowadź głowicę płynnymi ruchami: od środka twarzy ku skroniom i zawsze zdecydowanie ku górze. Zadbaj o idealny poślizg: dla pełnego komfortu i skuteczności technologii EMS, zawsze stosuj urządzenie na nawilżoną skórę. Użyj specjalistycznego żelu przewodzącego lub swojego ulubionego beztłuszczowego serum. Dzięki temu:

- Głowica płynie po skórze, kojąc ją i masując bez naciągania naskórka.
- Energia dociera prosto do celu, gwarantując najwyższą efektywność zabiegu.
- Cieszysz się luksusowym rytuałem, który jest bezpieczny i niesamowicie przyjemny.



obszar
zabronionego
stosowania

zalecane obszary
niskiego poziomu
użytkowania



Exclusive Series

Twój bezpieczny rytuał piękna

Zanim rozpoczniesz swoją podróż do idealnej cery z Neno Beauty Naya, zapoznaj się z kilkoma złotymi zasadami, które zapewnią Ci maksymalny komfort i profesjonalne efekty:

- **Przeciwwskazania:** Ze względu na zaawansowaną technologię EMS urządzenia nie należy stosować w przypadku posiadania implantów elektronicznych (np. rozrusznik), metalowych (w tym stomatologicznych) i aparatów ortodontycznych) oraz w okresie ciąży i karmienia piersią
- **Delikatne strefy:** Podczas masażu omijaj ruchomą część powiek oraz okolice tarczycy (środek szyi). W okolicach oczu i ust zawsze wybieraj najniższy poziom intensywności – Twoja skóra tam jest wyjątkowo subtelna.

Wskazówka: Pełną listę zaleceń oraz szczegółowe środki ostrożności znajdziesz w dołączonej instrukcji obsługi. Przeczytaj ją przed pierwszym użyciem, by cieszyć się pełnią możliwości Neno.

A woman with dark hair pulled back is using a white, ribbed facial device with two silver spherical rollers on her face. She has a soft smile and is looking directly at the camera. The background is a plain, light beige color.

Inteligentna pamięć - Twoje ustawienia, Twoje zasady

Neno Beauty Naya doskonale Cię zna. Dzięki inteligentnej funkcji pamięci, urządzenie przywołuje Twoje ulubione ustawienia natychmiast po włączeniu. Nie musisz niczego konfigurować od nowa - Twój spersonalizowany program ujędrniający jest zawsze gotowy do pracy, dokładnie tak, jak lubisz. Szybko, intuicyjnie i w Twoim rytmie.

Exclusive Series

Czas zabiegu to tylko 6 minut

Zapomnij o zerkaniu na zegarek. Inteligentny timer w Neno Beauty Naya przeprowadzi Cię przez profesjonalny zabieg w zaledwie 6 minut. Co 15 sekund subtelny sygnał podpowie Ci, kiedy przejść do kolejnej strefy twarzy, dbając o równomierne efekty. Po zakończeniu sesji urządzenie wyłączy się automatycznie.



Exclusive Series

Akcesoria w zestawie

Przezroczysta podstawka Neno Beauty Naya zapewnia stabilne przechowywanie produktu. Urządzenie możesz ustawić na toalecie, półce w łazience czy stoliku nocnym – zawsze będzie pod ręką i gotowe do użycia, a jednocześnie przechowywane w higieniczny i estetyczny sposób. W zestawie znajdziesz także miękką ściereczkę z mikrofibry, która ułatwia codzienne czyszczenie urządzenia, oraz kabel USB, dzięki któremu szybko i wygodnie naładujesz urządzenie.



kabel
USB-C



ściereczka
z mikrofibry

podstawka



Chcesz zwiększyć efekt pielęgnacji?

Aby dobrze rozpocząć masaż, oczyść skórę
szczoteczką soniczną **Neno Beauty Mica**.
Dzięki temu składniki pielęgnacyjne i działanie
EMS mogą działać jeszcze skuteczniej .

neno[®]
beauty
MICA



Exclusive Series

nenob[®] beauty

NAYA

DANE TECHNICZNE

Model:	Neno Beauty Naya
Zasilanie:	5V 0.7A
Moc	6W
Bateria:	1000mAh
Timer:	6min
Materiał:	ABS + PC + silikon + stop cynkowy
Wymiary:	84x45x68mm
Waga:	172g
Kod EAN:	5902479677163
Wymiary pudełka:	147x207x60 mm
Waga pudełka:	0,53kg
PN:	NEN-DOM-PI002
Zawartość zestawu:	masażer, podstawka, ściereczka z mikrofibry, kabel typ-C, instrukcja obsługi
Kontakt:	Tel.: 731 594 301; mail: info@nenop.pl
Producent:	KGK Trend sp. z o.o. ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków



NAGRODY DLA
FIRMY KGK TREND

Właściciela marki Neno:



Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy, wsparcia albo masz pytania do ekspertów, zadzwoń lub napisz bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta Neno. Infolinia: 731 594 301, mail: info@nenop.pl

Urządzenie przeznaczone do pielęgnacji skóry w warunkach domowych. Nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje zabiegów dermatologicznych ani medycznych.